




QuikRead go[®] CRP & CRP+Hb

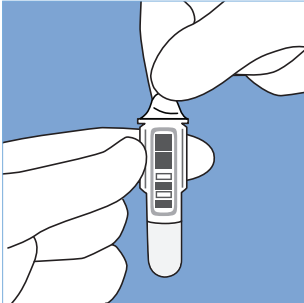


1 Ta av folien på kyvetten. Ikke berør den klare flate delen på den nedre del av kyvetten.

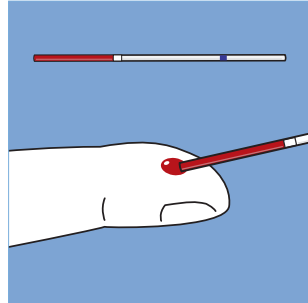


2 Fyll det blå-stripede kapillærrøret opp til den hvite stopperen (20 µl). Kontroller at det ikke er luftbobler i kapillærrøret. Tørk av overflødig prøvemateriale på utsiden.

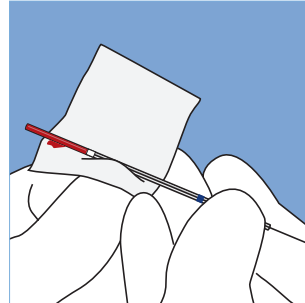

3 Tørk bort eventuelt søl på utsiden av kapillæret med en myk klut eller serviett.

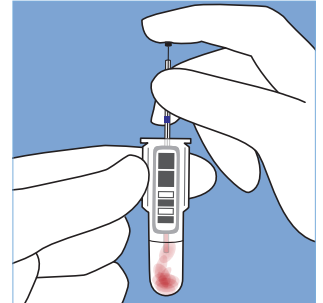


4 Plasser kapillærrøret (20 µl) i bufferløsningen i kyvetten, og trykk ned stempelet. Sørg for at kapillærrøret er helt tømt.

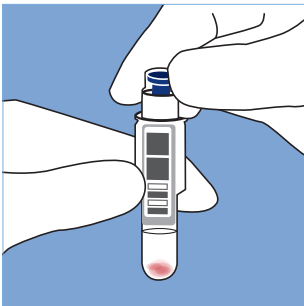

5 Lukk kyvetten tett med en CRP reagenskork. Ikke trykk ned den blå delen. Utfør testen innen 2 timer.



6 Velg **Analyse** i displayet på QuikRead go-instrumentet.

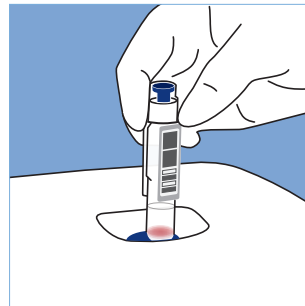

7 Sett kyvetten ned i målebrønnen på instrumentet. Strekkoden skal vende mot deg.



8 Når målingen er ferdig, vises resultatet i displayet og kyvetten kommer automatisk opp. På QuikRead go CRP+Hb-testen, vises Hb-resultatet under CRP-resultatet.

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.

QuikRead go[®] CRP & CRP+Hb



Kit

Uåpnet kit i 2–8°C: til **utløpsdato** på kitet



Boksen med reagenskorker

Oppbevaring i 2–8°C: til **utløpsdato** på kitet
Oppbevaring i 18–25°C: **1 måned** (3 måneder ved 7,5 timer/dag)



Kyvetter

I uåpnet foliepose i 2–25°C: til **utløpsdato** på kitet
Uåpnede kyvetter i åpen foliepose:
i 2–8°C: **6 måneder** / i 18–25°C: **3 måneder**



Åpnet kyvette

La buffer oppnå 18–25°C før testen utføres
Testen må utføres innen **2 timer** fra kyvetten ble åpnet
Prøven er stabil i buffer i **2 timer**



CRP-kontroller

Uåpnet flaske i 2–8°C: til **utløpsdato**
Åpnet flaske i 2–8°C: inntil **2 måneder**



Hb-kontroll

Uåpnet flaske i 2–8°C: til **utløpsdato**
Åpnet flaske i 2–8°C: inntil **1 måned**

Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no

Tlf. +47 66 78 56 30

E-post for bestillinger: ordre@aidian.no

www.aidian.no

www.quikread.com

Produkt	Art.nr.
QuikRead go CRP med kapillærrør og stempler	133891
QuikRead go CRP+Hb med kapillærrør og stempler	140066
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb Control	141154
QuikRead kapillærrør 20 µl	132653
QuikRead stempler	132655
QuikRead go Instrument	135867